



## Dräger Atlan® A300

Gran flexibilidad mediante una sola  
plataforma de anestesia

El sistema de anestesia **Atlan® A300** ofrece gran flexibilidad mediante una sola plataforma de anestesia. Gracias a su conjunto de funciones clínicas y ventilación de calidad, **Atlan®** es la estación de anestesia ideal para todos los procedimientos quirúrgicos.

## CARACTERÍSTICAS

Permite una configuración tanto a nivel de software como hardware ajustada a las necesidades de cada veterinario/a


Pantalla a color

Ventilador de pistón eléctrico E-Vent sin consumo de gas motriz, batería para al menos 45 min de funcionamiento y pantalla táctil a color de 15,3"

Sistema paciente calefactado para reducir la condensación

Sistema de autochequeo

Tres modos ventilatorios de serie (espontánea, por volumen y por presión), sistema paciente calefactado y monitorización ventilatoria completa

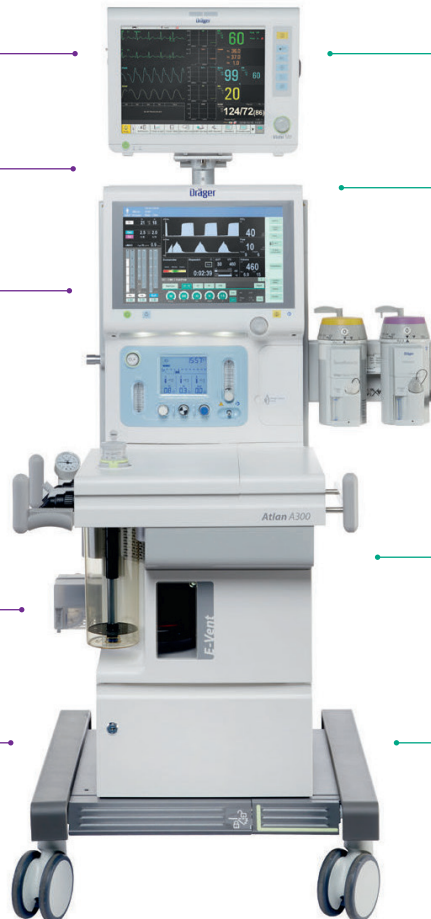

Múltiples modos ventilatorios opcionales

Posibilidad de añadir monitorización ventilatoria avanzada

Permite la instalación de soporte neonatal avanzado

Opción de monitorización de gas avanzada

Configuración con uno o dos vaporizadores de isoflurano o sevoflurano

## SEGURIDAD

Las vistas de pantalla personalizables junto con los monitores **Dräger®** permiten tener una rápida visión general del estado del paciente adaptada a sus necesidades. Asimismo, las herramientas de asistencia le ayudan a tomar decisiones seguras e informadas.

## FLEXIBILIDAD

La configuración de la estación de trabajo puede adaptarse a las necesidades específicas y permite ampliarse en el futuro. Mediante actualizaciones del software se puede añadir nuevas funciones para obtener un equipo en línea a las nuevas necesidades.

## PROTECCIÓN PULMONAR

**Atlan®** ofrece numerosas funciones para ayudar al anestesiista a proteger los pulmones del paciente durante la cirugía. Ofrece una ventilación de calidad UCI, lo que incluye el suministro de un volumen tidal preciso, una PEEP activa y una elevada sensibilidad de trigger para una respiración espontánea.

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Tel. 93 565 61 65 | [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)  
B. Braun VetCare, S.A. - a B. Braun company